



medemagruppen



medemagruppen
Hippocampe



medemagruppen

Hippocampe

- Et hav av muligheter

Hippocampe er et fritidshjelpemiddel som flytter grenser og gjør det mulig å utforske og oppleve ting selv om du ikke kan komme dit på egenhånd.

Hippocampe tåler både saltvann og klor. De brede hjulene gjør det enkelt og stabilt å bevege seg på sand og andre porøse overflater. Med denne bade- og strandstolen kan du nyte en dag på stranden med en forfriskende svømmetur eller besøke badehuset.

Om vinteren kan Hippocampe utstyres med ski som tilbehør. Å kunne nyte naturen med varmt drikke og en sjokolade i skisporet kan være et fint minne for livet og mulig for så mange flere med en Hippocampe.

Vognen er bygget av svært lette materialer, felles lett sammen, og kan leveres med praktisk transportbag som tilbehør.





medemagruppen



Strand

Hippocampe er designet for bruk i sand og har derfor ingen kulelager. Ballonghjulene som finnes som tilbehør gjør det enda enklere å komme seg rundt i løs og tørr sand.



Bad

Hippocampe tåler både saltvann og klor. Med en ledsager kan du som bruker Hippocampe ta den av og på i vannet. Dette gjør det mulig å nyte bading selv der det ikke er tilgang til andre hjelpemidler.



Vannaktivitet

Hippocampe gjør det lettere å få tilgang til annet utstyr for vannaktiviteter: tilpasset kajakkpadling, handisurfing, dykking, seiling og svømming.



Tur

Med Hippocampe og dets forskjellige tilbehør det vil være mulig å nyte en deilig tur langs stranden, på skogssti eller ute på landet.



Vandring

Hippocampe gir deg muligheten til å oppdage og utforske steder som er vanskelige å besøke med en vanlig rullestol.



Snø

Nyt vinter og snø ved å utstyre Hippocampe med ski.



medemagruppen

Tilbehør Hippocampe

Hippocampe er tilgjengelig i to farger: blå som er standard eller rosa, og i fire størrelser: S, M, L og XL.

Rullestolen tilbys med mye tilbehør som lar deg konfigurere den etter dine behov.

Noe tilbehør er inkludert i vår norske standarddesign.



Støtte og sikkerhet



Armlene, par (std)

Armlenene, dekket med skum kan vridas utover og opp for enklere forflytning til og fra Hippocampe-rullestolen.



Justerbar hodestøtte

Hodestøtten er dekket med behagelig skum og tilpasser seg brukerens posisjon. Den er justerbar forover, bakover og i høyden.



Vest

Laget av komfortabelt og vannavstøtende elastisk neopren, 4-punktssele gjør det lettere for brukeren å få støtte og posisjonering.



Hoftbelte (std)

Det brede og komfortable midjebeltet holder brukeren i en trygg posisjon nederst på setet. Et komfortskum beskytter brukeren mot kontakt med spennen.



20" Eikebeskytter

20" hjulbeskyttere beskytter brukerens hånd mot kontakt med hjulene.



Parkeringsbrems (std)

Svingbare og rustfrie parkeringsbremsen gjør at rullestolen kan fikseres i små bakker eller for å lette forflytning.



Sittinsats Stabilo

Stabilo neoprenosisjoneringsputen kan formes med et vakuumpompe og gir ekstra støtte til brukeren ved perfekt å tilpasse seg formen og kroppens behov. Den er vannett.



Høydejusterbar og fellbar ryggstøtte (std)

Den høydejusterbare og sammenleggbare ryggstøtterammen gjør det enkelt å variere den totale høyden på ryggstøtten etter brukerens behov.



Nett til armlener

Armlennettene passer mellom setet og armlenet, for å beskytte brukerens hender mot hjuleikene.



Nett til fotstøtte

Fotstøttenettet passer mellom setet og fotstøtten, for å beskytte brukerens føtter.





medemagruppen

Fritid



Ballonghjul, par

Ballonghjulene gjør det lettere å ta deg fram i myk fin sand.



Skikit, forhjul

Skien er montert på Hippocampes forhjul.



Skikit, bakhjul

De bakre drivhjulene kan enkelt kobles fra og skiftes ut til skissetet.



Styre

Styret optimaliserer påskyverens håndposisjonering og gjør terrengvandring enklere.

Oppbevaring



Transportbag

Transportbagen forenkler og beskytter Hippocampe under transport, for eksempel i bil eller fly.



Veske ryggmontert

Vesken er montert på baksiden av setet og gjør det er lett oppbevare og holde orden på sine personlige eiendeler under ulike aktiviteter.





medemagruppen



HIPPOCAMPE®

Fargevalg



Marmorert blå (std)



Marmorert rosa
(bestillingsvare)

Størrelsguide



Str S: opp til 140 cm
Str M: fra 140-165 cm
Str L: fra 165-185 cm
Str XL: fra 185 cm

CE, FDA og ISO 13485

VIPAMAT sikrer et nivå av kvalitet og ytelse som oppfyller sertifiseringskravene CE, fra FDA og ISO 13485.

Teknisk data

Sete: behagelig vannavstøtende skum (3 cm tykt) dekket med et svart stoff som tørker raskt og forhindrer hudproblemer. Stoff og skum som oppfyller brannmotstandsstandarden NFEN1021-2.

Ramme: rustfritt stål og eloksert aluminium dekket med et skumbelegg, som gjør at temperaturen på rammen ikke påvirkes nevneverdig av varme eller kulde.

Kjørebøyle: anodisert aluminiumsrør med håndtak dekket med skum, noe som gjør Hippocampes kjørebøyle behagelig å holde uansett utetemperatur.

Hjul: 20" doble hjul i rustfritt stål og lavtrykksballonghjul er tilgjengelig som ekstrautstyr.

Mål



Sittelengde - fot

S: 72 cm M: 82 cm
L: 92 cm XL: 105 cm



Total lengde

S: 170 cm M: 180 cm
L: 190 cm - XL: 203 cm




Ryggstøtte høyde

37 cm till 47cm



Total høyde

103 cm

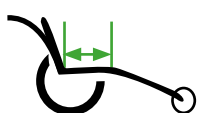

Setedybde

37 cm



Setehøyde - fra bakken

20 toms hjul: 34 cm
Ballong hjul: 34 cm



Vekt

Vekt uten tilbehør: 17 kg
Maks brukervekt: 130 kg



Total lengde sammen felt

S: 116 cm M: 126 cm
L: 136 cm XL: 149 cm




Sittebredde

40 cm



Innvendig bredde

(uten armlen)
50 cm

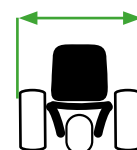

Total bredde med ballonghjul

100 cm



Total bredde doble hjul

68 cm





Ver. 05062024



medemagruppen